



Informationen zur Hörgerätepflege und -reinigung

aus: Die HADEO Pflegefibel für Hörsysteme von der Hansaton Akustik GmbH

Die Reinigung von HdO- Ohrstücken mit Reinigungs- tabletten und -flüssigkeit.

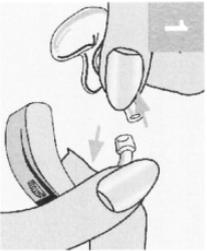

Trennen Sie durch kräftiges Ziehen den Schallschlauch vom HdO-System. Beim Minischlauchsystem drehen Sie den Minischlauch am oberen Ende des Hörsystems ab.

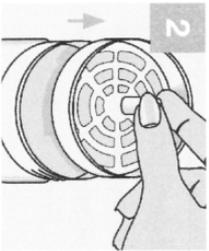

Nehmen Sie das Sieb aus der Reinigungsdose.




Reinigung mit Tabletten
Legen Sie eine Reinigungstablette in die $\frac{3}{4}$ voll mit Wasser gefüllte Reinigungsdose. Bitte unbedingt die dem Produkt beiliegende Gebrauchsanweisung beachten. Schon ist Ihre Reinigungsflüssigkeit fertig.




Reinigung mit Flüssigkeit
Füllen Sie die Dose $\frac{3}{4}$ voll mit Reinigungsflüssigkeit. Oder füllen Sie die Dose 0,5 cm hoch mit Reinigungskonzentrat (1:5, nur verdünnt anwenden) und danach mit Wasser $\frac{3}{4}$ voll auf.

Anmerkung: Bitte reinigen Sie die Ohrpassstücke ihres Kindes **1-2 mal pro Woche.**

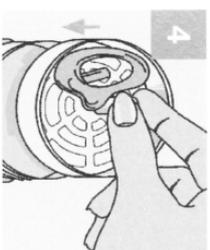

Legen Sie das Ohrstück mit dem Schallschlauch (**auf keinen Fall mit Hörsystem!**) auf das Sieb und tauchen Sie beides mindestens 15 Minuten in die Reinigungsflüssigkeit.

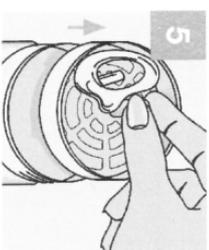

Nehmen Sie das Sieb aus der Dose heraus – das Ohrstück mit Wasser abspülen und abtrocknen.




Den HADEO Puster fest in den Schallschlauch stecken und kräftig drücken – Flüssigkeitsreste werden aus dem Schallschlauch und dem Ohrstück entfernt.

ACHTUNG!


Aus hygienischen Gründen sollte die Reinigungsflüssigkeit nach jeder Anwendung gewechselt werden.

Das Trocknen von Hörsystemen mit Trockenkapseln und -behälter.

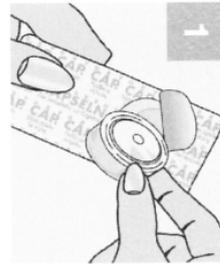

Nehmen Sie eine HADEO-Trockenkapsel aus der Verpackung. (Die Trockenkapsel an sich nicht öffnen!)

Anmerkung: Bitte legen Sie die Kapsel mit der Pappe nach oben in die Dose.

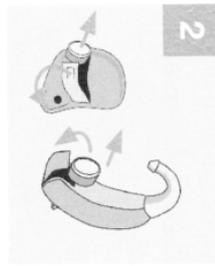

Öffnen Sie das Batteriefach Ihres HdO- oder Ihres IO-Hörsystems und entnehmen Sie die Batterie.



Legen Sie nun das Ohrstück und das HdO- bzw. das IO-Hörsystem und die Trockenkapsel in den Trockenbehälter. Schließen Sie den Behälter gut. Sie können Ihr Hörsystem auch im Trockenbeutel (Seite 16/17 sowie 20/21) oder in der DRYBOX (Seite 23) trocknen.

ACHTUNG!

Mindestens einmal täglich über Nacht durchführen. Den Trockenbehälter samt Trockenkapsel nach jeder Anwendung bitte gut verschließen. Färbt sich die Kapsel beige, tauschen Sie die Trockenkapsel gegen eine neue orangefarbene aus.

Liebe Eltern,

damit die Hörgeräte, die Cochlea Implantate (CI) oder die Roger Focus-Geräte Ihres Kindes verlässlich funktionieren, ist eine tägliche Pflege der Geräte wichtig und notwendig: Die Geräte sollten täglich getrocknet und die Ohrpasstücke 1-2 mal wöchentlich gereinigt werden.

Die Hörhilfen Ihres Kindes sollten die Nacht in der Trockenbox verbringen, damit sie am nächsten Tag wieder optimal funktionieren können. Dafür sollten – falls vorhanden – auch die FM-/Roger-Empfänger für die digitale akustische Übertragungsanlage (früher FM-Anlage) vom Hörgerät bzw. CI entfernt und mit in die Box gelegt werden.

Das ist vor allem bei Kindern, die viel Sport machen und/oder schnell schwitzen, sehr wichtig.

Dazu können Sie eine **Trockenbox mit Trockenkapseln** (siehe oben) **oder** eine **elektrische Trockenbox** nutzen.

Auf lange Sicht rechnet sich oft die Anschaffung einer elektrischen Box, da Sie hierfür nicht regelmäßig Trockenkapseln bei Ihrem Akustiker kaufen müssen. Kleine elektrische Trockenboxen kosten beim Akustiker ca. 60 €.

Für neue Hörgeräte mit Akkus gibt es größere Boxen, die über die Akku-Ladestation gestülpt werden können.

Diese kosten ca. 90 €.

Durch die regelmäßige Reinigung und Trocknung lassen sich bereits viele Probleme vermeiden:

die Ohrpasstücke verstopfen weniger, die Kontakte der FM-/Roger-Empfänger korrodieren weniger, die Geräte funktionieren zuverlässiger.

Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe!